




DIAM Viewer

Viewer de diffusion d'images DICOM

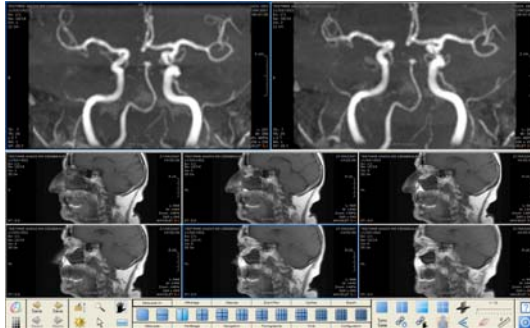


La licence logicielle DIAM Viewer, qui installée sur des PC compatibles permet la revue d'images médicales DICOM issues d'un DIAM⁴ Server et ou de CD DICOM

FONCTIONNALITES

L'application DIAM Viewer intègre les fonctions d'affichage et de mesure :

- Affichage 2D ;
- Coupe de référencs ;
- Zoom 1/1, Loupe ;
- Mesures de distance, d'angle, ROI, HU ;
- Affichage 3D MPVR ;
- Mode Ciné ;
- Caches et filtre de réhaussement ;
- Export AVI et JPEG ;
- Impression papier ;
- Compte rendus vocaux ;
- Explorateur de CDROM DICOM.

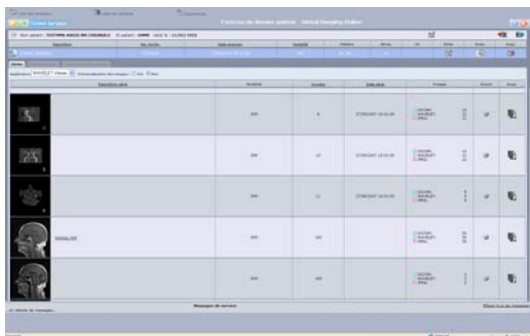

PREREQUIS

L'application DIAM Viewer (Viewer WEB de diffusion) est installable sur les PC de type standard.

Les spécifications minimales requises sont :

- OS Windows XP, Vista
- Processeur > 1 GHz
- Mémoire > 512 MB
- Navigateur : Internet Explorer 5.5, Netscape 6.2, Firefox 1.0 ou Mozilla 1.6
- Ecran de 19 pouces, 1440 x 900, 16 million de couleur

Nota : La qualité de visualisation est directement liée à la qualité de l'écran du PC sur lequel le logiciel DIAM Viewer est installé.



INSTALLATION & GARANTIE

Incluse dans la fourniture en France
Métropole, elle comprend :

- La garantie pièces et main d'œuvre pour une période d'un an à partir de la date de livraison sur site ;
- Le support par Hot Line pour une période d'un an.



CERTIFICATIONS

La société Global Imaging Online est certifiée ISO 9001 / 13485
Le viewer de diffusion de Global Imaging Online est marquée CE.

Elle est conforme aux recommandations de l'IHE

La Société Global Imaging Online se réserve le droit de faire tous changements de modèles, améliorations ou déviations des spécifications décrites, détails illustrés ou tous changements qui pourraient s'avérer nécessaires, ainsi que de retirer cette offre de son catalogue sans autre avis